


Leica CV5030

Szövetteni és Cytológiai fedő automata





A felhasználó barát kontrol panel lehetővé teszi a személyre szabott beállításokat, hogy azok megfeleljenek a sajátos laboratóriumi elvárásoknak. Egyszerűen csak kiválasztjuk az ideális beállítást a különféle mintákhoz.

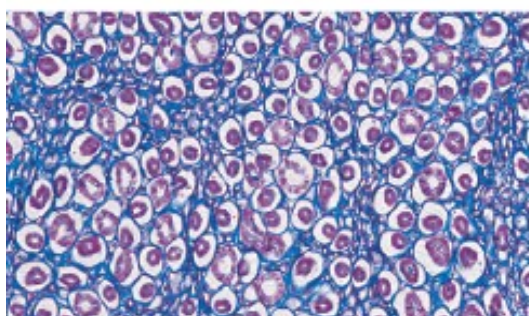

Leica CV5030 Automatikus tárgylemez fedő automata... az alkalmazkodás képességével

Egy fedőautomata eléggé rugalmas ahhoz, hogy megfeleljen a laboratóriumi szükségeknek?

A Leica CV5030 fedőautomata könnyen alkalmazkodik a különböző minták sajátos elvárásaihoz úgy, mint a szövettani metszetek, cytológiai kenet, és minden rétegnek. Elfogadva a festőkeretek és festő automaták széles spektrumát a CV5030 automata könnyen alkalmazkodik a jelen és a jövő laboratóriumi igényeihez.

A CV5030 gazdaságosan és kiváló optikai minőségben fedi le a tárgylemezeket, biztosítja azok hosszú távú tárolásait. A mindennapi rendelkezésre álló ragasztó médiumok és a különböző méretű tárgylemezek elfogadásával lehetővé válik, hogy a CV5030 alkalmazkodjon a jelen laboratóriumi környezethez. A CV5030 egyszerű működése és fejlett műszaki adottsága révén hosszú évekre megbízható használatot biztosít.

A Leica CV5030 Fedőautomata jelenlegi laboratóriumi használatában felkészíti Önt a jövő laboratóriumára. A Leica ST5020-as festő automatával való integrálásának lehetőségével a Leica CV5030 kiküszöböli a festő lemezek festőből a fedőbe továbbításának hagyományos kézi folyamatait, és kialakít egy teljesen integrált/ egyesített munkaállomást.

A Fedőautomata, mely alkalmazkodik a laboratóriuma szükségleteihez... VÉGRE!



A fedőlemez állomás kompatibilis a különböző méretű lemezekkel és automatikusan kihagyja a hibás fedőlemezeket. Rendkívül konzisztens fedési minőséggel dolgozik.



A ragasztó adagolófej egy parkoló állomáson tárolja a szívócsöveket, hogy azok ne ragadjanak bele az adagolócsőbe és így biztosítja a megfelelő fedési körülményeket.



A betöltő edény kompatibilis akár 60 tárgylemezzel és meg lehet tölteni reagensekkel, amely megnöveli a hatékonyságot és ez által lehetővé teszi a nedves és száraz fedést.



A CV5030 fedő automata az ST5020 festő automatával kombinálva egy teljesen integrált festő-fedő munkaállomást biztosít, automatizált körülmények között.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK:

Az eszköz típusa:	Automatizált tárgylemez fedő
Minta típusok:	Szövetteni és Cytológiai anyagok, Monolayer preparatumok
Teljesítmény:	Kb. 400 lemez/óra (kb.9 másodperc/lemez)
Fedőlemez méret:	22-24 x 40-60 mm
Fedőlemez tároló kapacitás:	120-160 fedőlemez (mérettől függően)
Fedő anyag:	Kereskedelemben elérhető típusok
Fedő anyag mennyisége:	Egyéni beállítás a mennyiség, típus és fedőlemez méret alapján
Fedő anyag tartály nagyság:	250 ml
Berakó keretek:	A legtöbb kereskedelemben elérhető típus megfelelő (60 lemezig)
Kirakó keretek:	20 vagy 30 lemez kapacitás (60 lemezig)
Káros anyagok elszívása:	Aktív szén-szűrő és elszívó tömlő rendszer

Névleges feszültség és frekvencia: 100-250 VAC/ 50-60 Hz
Alapkészülék (Szé x Mé x Ma), mm-ben: 420 X 600 X 550
Önsúly, csomagolás nélkül: Kb. 57 Kg

További tulajdonságként opcionális a nedves vagy száraz fedőlemez használat, adagoló fej védelem nedves parkoló pozícióban keresztül, memória funkció 4 szokásos beállításhoz, Multisize fedőlemez tartó, üveg szenzor a törött fedőlemezek automatizált kezeléséért, opcionális transzfer modul az ST5020 Multistainer-rel történő integrálhatóságért.

A CE és CSA előírásoknak megfelelően tervezve és gyártva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A modern fejlesztés, gyártás és minőség-ellenőrzés DIN EN ISO 9001 tanúsított, a legmagasabb minőség és megbízhatóság érdekében.



A Leica Biosystems egyesíti a terméket, a minőséget és a támogatást. Egy teljes megoldást kínál, mely segíti a munkafolyamatok előrehaladását, növeli a diagnosztikai egyértelműséget és azt biztosítja, ami tényleg számít – jobb beteg gondozást.

Leica Biosystems

Leica Biosystems (www.leicaBiosystems.com) egy globális vezető a munkafolyamat megoldások és automatizálás terén, mely az anatómiai patológiai laboratóriumok és kutatók számára biztosít egy átfogó termék skálát a patológiai folyamatok minden egyes lépéséhez, a minta előkészítéstől a festésen át a képalkotásig és a leletezésig. A mi könnyű felhasználható és következetesen megbízható ajánlataink segítenek a munkafolyamatok hatékonyságát és a diagnosztikai bizonyosságot fejleszteni.

A Leica Biosystems - egy nemzetközi vállalat, egy a világot átfogó jelentős ügyfélszolgálattal:

North America Sales and Customer Support

North America 800 248 0123

Asia/Pacific Sales and Customer Support

Australia 1800 625 286

China +85 2 2564 6699

Japan +81 3 5421 2800

South Korea +82 2 514 65 43

New Zealand 0800 400 589

Singapore +65 6779 7823

Europe Sales and Customer Support